

## SWISS optio Geräteträger



Geräteträger

### Der **Geräteträger** auf einen Blick:

- universell einsetzbarer Geräteträger zur Versorgung des Patienten auf klinikinternem Transport
- mit Einhängenvorrichtung zur Befestigung am Patientenbett
- mit ausziehbarem Handgriff und Rädern zur Verwendung als Trolley
- individuell ausrüstbar mit Geräten entsprechend dem gewünschten Einsatzgebiet
- trotz robuster und kompakter Bauform, leicht im Gewicht
- vorwiegend für den Einsatz im Spital- und Klinikbereich

Der **Geräteträger** ist eine universell einsetzbare Transport- und Lagervorrichtung für die Aufnahme von Geräten und Zubehör für die Beatmung und/oder Absaugung. Mit der Aufhängenvorrichtung kann der **Geräteträger** für den klinikinternen Transport direkt am Patientenbett befestigt werden. Für den sonstigen Gebrauch verfügt der **Geräteträger** über zwei Räder, so dass er mit dem ausziehbaren Handgriff als Trolley verwendet werden kann.


Um das Gewicht möglichst leicht zu halten, besteht das Grundgestell des **Geräteträgers** aus Aluminium. Durch die qualitativ hochwertige Verarbeitung sowie die Verwendung von hochwertigen Komponenten bei den Befestigungsteilen, Handgriff und Rädern ist der **Geräteträger** sehr robust und den hohen Anforderungen des Klinikalltags gewachsen.

Die individuelle Gerätebestückung hängt von der spezifischen Anwendung und den individuellen Bedürfnissen der Anwender ab. Die Beispiele auf der Rückseite sollen nur als Anregung dienen, welche möglichen Komponenten und Kombinationen zum Einsatz kommen können.

## Technische Daten :

Material	Grundgestell Aluminium, farblos eloxiert, Ausziehgriff Aluminium schwarz Rollen Ø75 mm, Bockrolle INOX, Gleitlager elektrisch leitend
Befestigungsschienen	Normschienen 25 x 10 mm
Flaschenaufnahme	für Flaschen bis Durchmesser 100 mm, zusätzliche Flaschenhalterung
Abmessungen	B x H x T : 446 x 790 x 260 mm B X H X T :446 x 1200 x 260 mm (mit ausgezogenem Handgriff)
Gewicht	7 kg (ohne Geräte)

## Beispiele für Gerätekonfigurationen zu GX10047/2 :

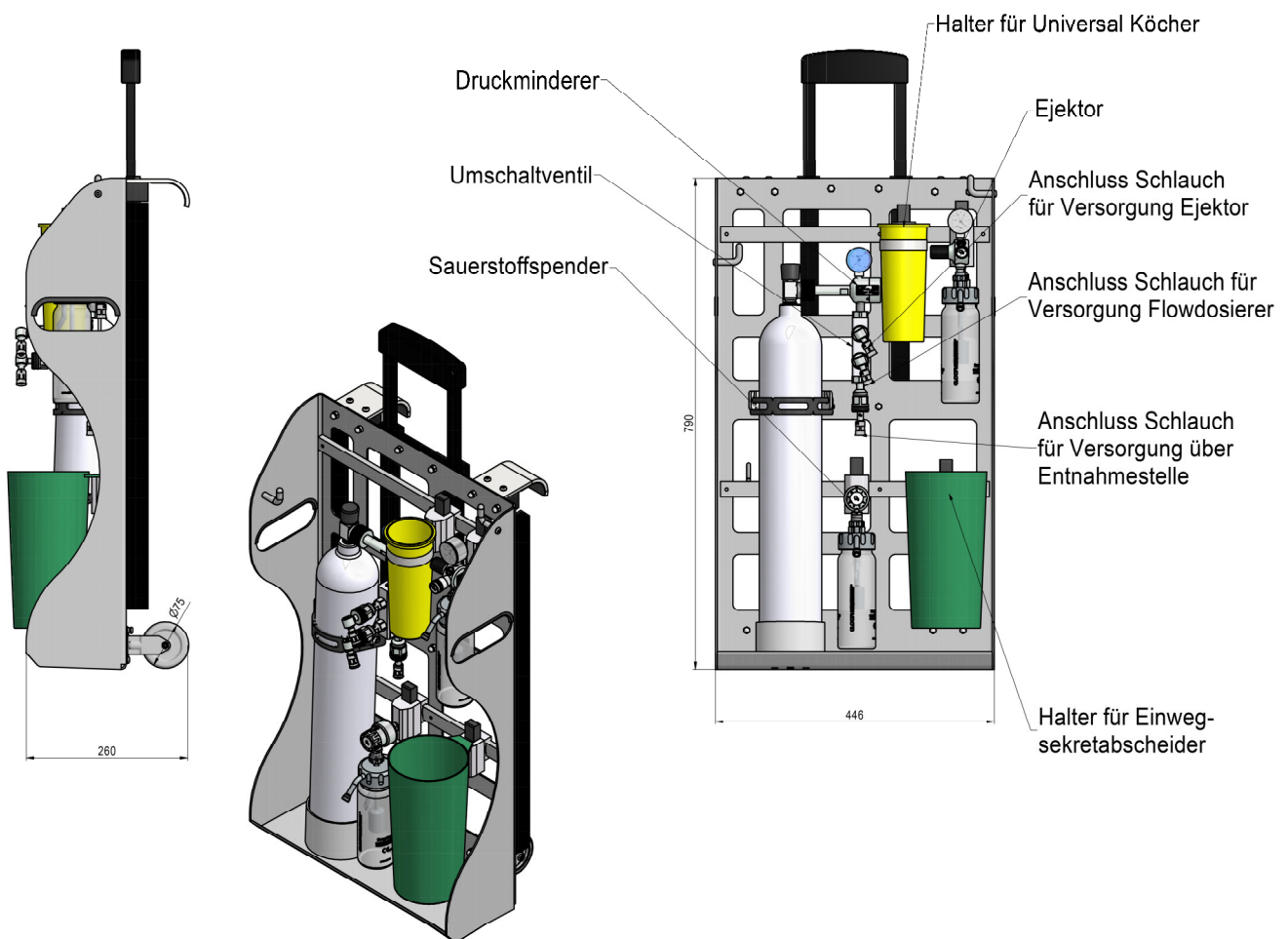

Für individuelle Gerätekonfigurationen verlangen Sie unser spezielles Konfigurationsblatt oder eine persönliche Beratung.

Aenderungen vorbehalten. Alle Schutzmarken sind Eigentum der Gloor AG.