

La précision, gage de sécurité

GLOOR
MEDICAL

SWISS optio support mobile



support mobile

Le **support mobile** pour accessoires sur rail en un coup d'oeil:

- support mobile universel destiné au maintien des soins du patient pendant les déplacements dans la clinique
- avec dispositif de suspension pour fixation au lit du patient
- avec poignée télescopique et roues pour l'utiliser comme trolley
- installation d'appareils de son choix selon le domaine d'application souhaité
- forme compacte et robuste, néanmoins poids léger
- usage particulièrement en milieu hospitalier

Le **support mobile** est un dispositif de transport et de stockage universel destiné à recevoir les appareils et accessoires de respiration et/ou aspiration. Grâce à son dispositif de suspension, le **support mobile** peut être fixé directement au lit du patient pour les déplacements internes à l'hôpital. Pour les autres applications, le **support mobile** est équipé de deux roues permettant un usage comme trolley avec la poignée télescopique.


Pour assurer une légèreté maximale, la structure du **support mobile** est en aluminium. Grâce aux finitions soignées et à la qualité des composants des pièces de fixation, de la poignée et des roues, le **support mobile** est très robuste et répond aux attentes élevées imposées par un usage en milieu hospitalier.

Le choix des appareils à installer dépend de l'application spécifique et des besoins individuels de l'utilisateur. Les exemples au verso sont de simples suggestions des composants et combinaisons possibles.

Caractéristiques techniques :

Matière	châssis aluminium, anodisé naturel, poignée télescopique aluminium noir roue Ø75 mm, roulette fixe INOX, cadre avec mise à terre électrique
Rails de fixation	rail standard 25 x 10 mm
Support pour bouteille	pour bouteille avec diamètre jusqu'à 100 mm, fixation de bouteille supplémentaire
Dimensions	L x H x P : 446 x 790 x 260 mm L x H x P : 446 x 1200 x 260 mm (avec poignée télescopique)
Poids	7 kg (sans appareils)

Exemples de configuration pour GX10047/2 :

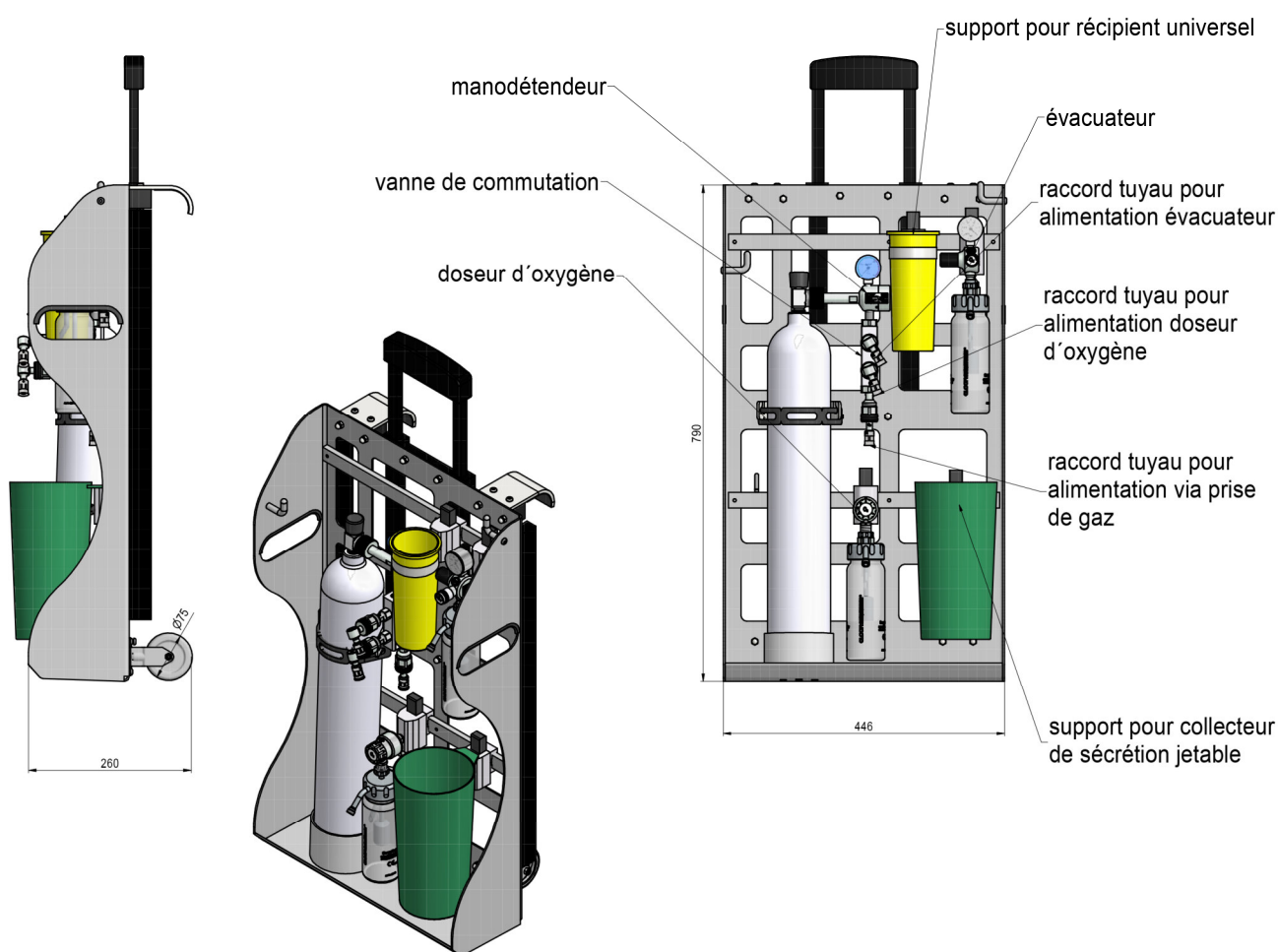

Pour une configuration individuelle, veuillez demander notre fiche spéciale de configuration ou un conseil personnalisé.

Sous réserve de modifications. Toutes les marques déposées sont propriété de Gloor SA