

La précision, gage de sécurité

GLOOR
MEDICAL

SWISS optio mélangeur de gaz



mélangeur

Le mélangeur de gaz en un coup d'oeil:

- pour le mélange homogène de deux gaz selon table de conversion
- réglage en continu du volume de soutirage
- disponible en différentes plages de débit (0-3 l/min, 0-16 l/min et 0-32 l/min)
- construction simple et facile à entretenir
- avec support à rail intégré

Le **mélangeur de gaz** se compose d'un boîtier de mélange, de deux débitmètres pour les différents gaz et d'un support à rail intégré.

Le **mélangeur de gaz** permet un mélange homogène de deux gaz dans des proportions de mélange quelconques directement chez le patient.

Pas de danger de confusion des raccords de gaz par les entrées avec des boîtiers NIST spécifiques au gaz.


Le **mélangeur de gaz** peut être complété par un humidificateur gazeux ou d'aérosol additionnel.

Marquage CE selon directive sur les produits médicaux 93/42/EEC.

Caractéristiques techniques :

Pression d'alimentation	4.5 bars (+/- 0.2 bar)
Plages de débit	0-3 l/min, 0-16 l/min, 0-32 l/min
Précision de mesure	+/- 10% ou 0.5 l/min de la valeur mesurée, la valeur supérieure est déterminante
Gaz	Air + O ₂ / O ₂ + N ₂ O
Entrée	G1/4" filetage intérieur, boîtier NIST
Sortie	G1/4" filetage intérieur, G1/4" filetage extérieur, 9/16 UNF, G3/8" filetage extérieur
Matière	aluminium, inox, laiton, pièces extérieures nickelées ou anodisées, PE, PA, tube de mesure et de protection en PC
Matériau d'étanchéité	PA, EPDM
Fixation	support à rail pour des rails de 20x8 jusqu'à 40x8
Température de service	-20° jusqu'à +60°C
Dimensions	L x H x P : 119 x 180 x 82 mm
Poids	580g

Variantes d'exécution Art.GM44xx :

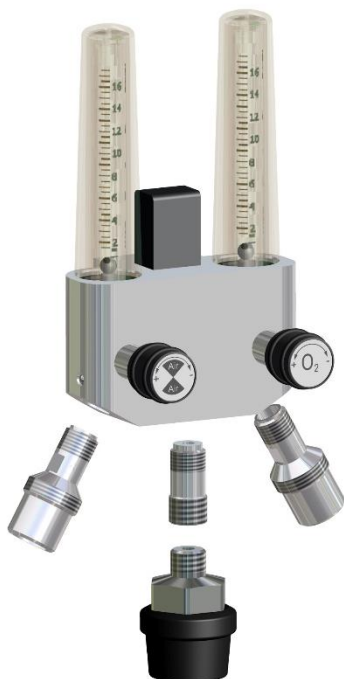

Indications nécessaires pour la commande :

Gaz (combinaison)	Air + O ₂ /O ₂ + N ₂ O
Plage de débit	0-3 l/min, 0-16 l/min, 0-32 l/mn
Entrée	G1/4" filetage intérieur, boîtier NIST
Sortie	G1/4" filetage intérieur, G1/4" filetage extérieur, 9/16 UNF, G3/8" filetage extérieur

Sous réserve de modifications. Toutes les marques déposées sont propriété de Gloor SA.

GLOOR

GLOOR SA
Kirchbergstrasse 111
3401 BURGDORF
SUISSE

www.gloor.ch
gloor@gloor.ch
Tél.: +41 34 427 47 47
Fax.: +41 34 423 15 46