

SWISS optio Entnahmestelle DIN

Entnahmestelle



Die Entnahmestelle DIN auf einen Blick:

- Attraktives, funktionales Design
- Vollmetall und robust
- Gascodiert
- Servicefreundlich und langlebig
- Das Einsatzgebiet ist der Spital-, Klinik- und Rettungsbereich

Die **Entnahmestelle DIN** dient der Entnahme von medizinischen Gasen und Vakuum aus einer zentralen Gasversorgung.

Die **Entnahmestelle DIN** ist für den Kanaleinbau, Einbau in Deckenversorgungseinheiten und für Unter-/Aufputz Installationen konzipiert. Ein „schwimmender“ Abdeckring (als Zubehör erhältlich) dient der Minimierung des Spaltabstandes zwischen Entnahmestelle und Frontabdeckung. Daraus ergeben sich ästhetische und staubabweisende Vorteile.

Das Design der **Entnahmestelle DIN** ist einzigartig. Die Vollmetallausführung ist robust, funktional und langlebig.


Die **Entnahmestelle DIN** verfügt über ein Absperrventil, mit dem die Gaszufuhr komplett unterbrochen werden kann ohne dass die Zuleitung abgesperrt werden muss. Eine einfach zu ersetzende Dichtungseinheit garantiert kostengünstige und schnelle Wartungen.

Die **Entnahmestelle DIN** entspricht den Anforderungen der harmonisierten Norm EN ISO 9170-1. CE Kennzeichnung gemäss Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.

Technische Daten :

Druckbereich	Druckgase max. 6 bar, Vakuum 0 bis -1000 mbar
Ausführungsvarianten	Kanalmontage Deckenversorgungseinheiten Unterputz Aufputz Mit oder ohne Abdeckring
Gas	Air, O ₂ , CO ₂ , N ₂ O, Vakuum
Anschluss	Rohr gerade Durchmesser 8 mm zum Einlöten in die zentrale Gasversorgung Rohr gebogen Durchmesser 8 mm zum Einlöten in die zentrale Gasversorgung Weitere auf Anfrage
Material	Messing, Aussenteile vernickelt, Kupfer, POM, EPDM, FKM
Betriebstemperatur	-20° bis +60°C
Abmessungen	B x T x Durchmesser : 80 mm x 69.5 mm x 50 mm (Sockelbaugruppe)
Gewicht	700 gr (Version Medienkanal)

Ausführungsvarianten GM30xx :

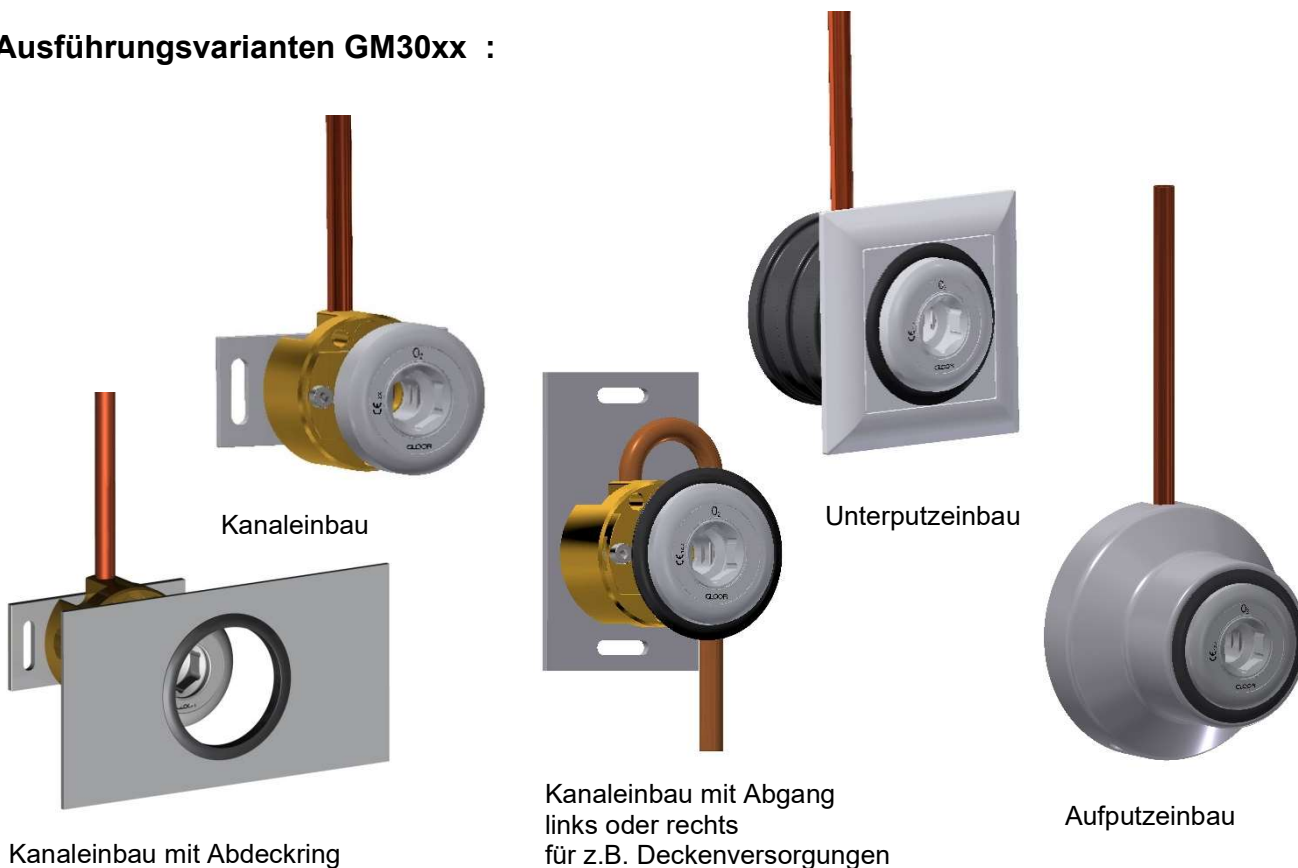

Notwendige Angaben bei Bestellung :

Gasart	Air, O ₂ , CO ₂ , N ₂ O, Vakuum
Ausführungsvariante	Einbau Medienkanal, Deckenversorgungseinheiten, Aufputz, Unterputz, mit oder ohne Abdeckring, Adaption auf bestehende Lösungen (auf Anfrage)

Aenderungen vorbehalten. Alle Schutzmarken sind Eigentum der Gloor AG.

GLOOR

GLOOR AG
Kirchbergstrasse 111
3401 BURGDORF
SCHWEIZ

www.gloor.ch
gloor@gloor.ch
Tel.: +41 34 427 47 47
Fax.: +41 34 423 15 46